

reer

BABYWAAGE **comfort deluxe**

ArtNr: 6409



Gebrauchsanleitung Babywaage „comfort deluxe“
Instruction Manual Babyscale „comfort deluxe“
Mode d'emploi Pèse-bébé „comfort deluxe“
Istruzioni d'uso Bilancia per baby „comfort deluxe“
Gebruiksaanwijzing Babyweegschaal „comfort deluxe“
Manual del Usuario del Báscula para bebés „comfort deluxe“

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Important! Please keep for further reference.

Important! A conserver pour une consultation ultérieure.

Importante! Conservate questa descrizione per poter far riferimento ad essa in un second momento.

Belangrijk! Bewaar voor latere raadpleging.

Importante! Guárdelas para poder leerlas posteriormente en caso necesario.

Gebrauchsanweisung Babywaage „comfort deluxe“, Art.Nr. 6409

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Reer-Qualitätsproduktes. Um alle Vorzüge dieses Gerätes nutzen zu können, lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam. Bewahren Sie diese anschließend zur späteren Einsichtnahme gut auf. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. So wird die Babywaage über Jahre zuverlässig ihren Dienst erfüllen.

Sicherheitshinweise / Zweckbestimmung

- Die Babywaage ist ausschließlich zur Messung des Körpergewichtes von Säuglingen und Kleinkindern bis max. 30 kg geeignet.
- überlasten Sie das Gerät nicht. Das maximal zulässige Gewicht beträgt 30 kg. Bei einer höheren Belastung kann der Messsensor zerstört werden.
- schützen Sie die Babywaage vor direktem Sonnenlicht, Temperaturen über 50°C und vor eindringendem Wasser.
- die beiliegende Batterie darf nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden
- lassen Sie die Babywaage nicht fallen
- verhindern Sie, dass Kinder auf die Waage springen und öffnen Sie sie nicht (ausgenommen das Batteriefach zum Batteriewechsel).
- vermeiden Sie starke Vibrationen, sowie Schläge mit harten und scharfen Gegenständen
- wechseln Sie die Batterien, sobald Ihnen dies die Batteriekontrollanzeige auf dem Display signalisiert (bei längerer Nichtbenutzung der Waage sollten die Batterien entfernt werden)
- schützen Sie die Waage vor Feuchtigkeit, verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich weiche Tücher

Beschreibung:



Übersicht technische Daten:

Messbereich:	0,00 bis 30,00 kg
Messgenauigkeit:	+ 0,02 kg (bis 5,00 kg) + 0,03 kg (5,01 kg bis 10,00 kg) + 0,04 kg (10,01 kg bis 15,00 kg) + 0,05 kg (15,01 kg bis 20,00 kg) + 0,06 kg (20,01 kg bis 25,00 kg) + 0,07 kg (25,01 kg bis 30,00 kg)
Anzeige:	LCD-Anzeige
Teilung:	0,01 kg
Betriebsspannung:	6 Volt
Stromversorgung:	4 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Maßeinheit:	kg / lb&oz
max. Wiegegewicht:	30 kg



HOLD-FUNKTION:

Da Babys oft unruhig auf der Waage liegen, ermittelt das Gerät automatisch den am längsten konstant gemessenen Wert. Verfälschte Werte durch Strampeln des Kindes oder Berühren der Waagschale werden so verhindert.

MEMORY-FUNKTION:

Die Memoryfunktion zeigt Ihnen nach Inbetriebnahme das Messergebnis der letzten Messung an.

TARA-FUNKTION:

Wollen Sie Ihr Baby auf einem Kissen oder Handtuch in die Waagschale legen, und das Gewicht des Baby's ohne das Zusatzgewicht ermitteln, verfahren Sie bitte wie in Abschnitt 4.1 beschrieben. ACHTUNG: Die Summe aller sich auf der Waage befindlichen Einzelposten darf 30 kg nicht überschreiten !

1. Standfüße	4. Musik „An / Aus“	7. Wiegefläche
2. Lautsprecher	5. Ein / Aus Schalter	
3. Batteriefach	6. LCD Display	

Bedienungsanleitung:

Vor der ersten Inbetriebnahme:

1.1. Batteriefachabdeckung öffnen:


Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes.

1.2. Einsetzen der Batterien

Setzen Sie die Batterien (4 Stück; Typ AA) in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei immer auf die richtige Polarität gemäß der Polaritätsangaben + und - im Batteriefach.

1.3. Batteriefachabdeckung schließen

Setzen Sie den Batteriefachdeckel nach dem Einlegen der Batterien wieder auf das Batteriefach bis dieser hörbar einrastet. Die Waage ist jetzt betriebsbereit.

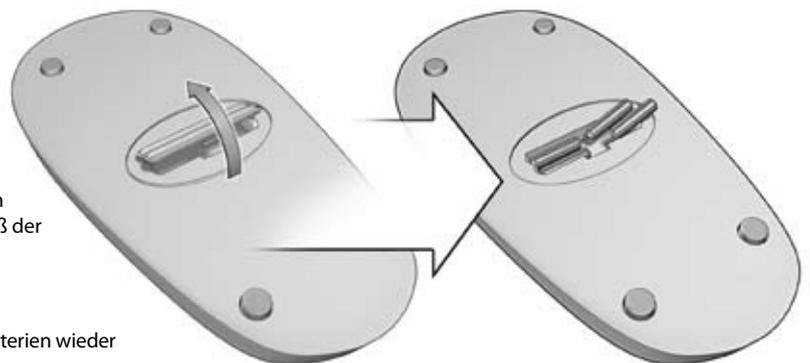

2. Inbetriebnahme:

Die Babywaage sollte grundsätzlich auf einer ebenen, trockenen Fläche stehen. Zum Ein- / Ausschalten der Waage drücken Sie den „On/Off“ Knopf. (Bild 1) Hinweis: Die Waage verfügt über eine Abschaltautomatik.

2.1 Einstellen der gewünschten Maßeinheit

Stellen Sie die gewünschte Maßeinheit ein, indem Sie, während des Ladevorgangs (Bild 2) erneut den „On/Off“ Knopf drücken. Die gewählte Maßeinheit wird auf dem Display angezeigt (kg / lb&oz).

Memoryfunktion:

Zu Beginn der Messung zeigt das Display das Messergebnis der letzten Gewichtsmessung an.



Sobald die Display-Anzeige auf „0.00“ schaltet (Bild 3) ist die Waage betriebsbereit und der Messvorgang kann beginnen.

i

3. Die Gewichtsmessung

3.1 Legen Sie das Kind in die Wiegeschale, sobald die Anzeige auf „0.00“ schaltet.

Wenn die Anzeige 3 mal blinkt, ist der Wiegevorgang abgeschlossen. Das Messergebnis wird auf dem Display dargestellt und bis zur nächsten Messung gespeichert. Sobald Sie das Kind von der Waage nehmen, wird der Messwert auf „0.00“ zurückgesetzt, spätestens jedoch 30 Sekunden nach der Gewichtsmessung.



Automatische Abschaltung:

Die Babywaage schaltet nach ca. 30 Sekunden automatisch aus.

4 Tarafunktion – Gewichtsmessung mit Zusatzgewicht


Falls Sie eine Messung mit einem zusätzlichen Gewicht (z.B. einem Handtuch oder Kissen) durchführen wollen, muss, um das reale Gesamtgewicht nicht zu verfälschen, dieses Gewicht erst tariert werden.

4.1 Legen Sie das Zusatzgewicht (z.B. Handtuch, Kissen, etc.) auf die Wiegeschale, warten Sie das Messergebnis ab und drücken Sie den „On/Off“ Knopf um diesen Wert zu speichern. Nehmen Sie das Gewicht von der Waage. Das Messergebnis wird auf dem Display angezeigt (Bild 4).

4.2 Fahren Sie mit Punkt 3.1 fort

5. Musikwiedergabe

Zum Starten der Musikwiedergabe, drücken Sie den Knopf „Musik“. Zum Beenden drücken Sie den Knopf „Musik“ erneut.

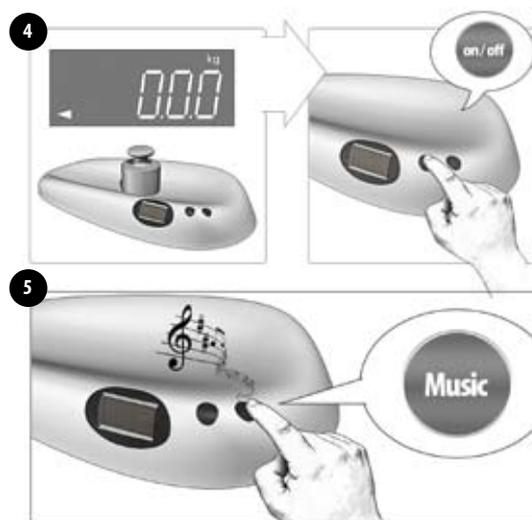

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Lappen. Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünner oder ähnliche ätzende Lösungsmittel.

Entsorgungshinweise

Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie in kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Nach dem Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät bitte sachgerecht über eine kommunale Sammelstelle für elektrische Altgeräte.

Garantie:

Bitte Kaufbeleg Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Eventuelle Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieverprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

Hersteller:

Reer GmbH, Riedwiesenstraße 7,
D-71229 Leonberg

